



Crosswalker

Ein übergreifendes
Workout-Ergometer



PARTNER FOR LIFE

Crosswalker

Übergreifendes Workout-Ergometer

Der Crosswalker ist ein übergreifendes Workout-Ergometer, wobei die oberen und unteren Extremitäten voll zur Krafterzeugung herangezogen werden. Durch die Kombination dieser beiden ballistischen Bewegungen wird die kardiorespiratorische Kapazität des Benutzers zusätzlich beansprucht.

Weiterhin eignet sich dieses Workout-Ergometer hervorragend für Herz- und Lungenpatienten, da es möglich ist, einen besonders niedrigen Widerstand von nur 5 Watt einzustellen.

Einzigartige "konstantes Drehmoment" Modus

Auf der Crosswalker wird Überbelastung des rehabilitierenden Patienten ausgeschlossen, da der „Drehmoment“ konstant gehalten werden kann. Bei Workout-Ergometer ohne Drehmomentsteuerung wird eine Reduzierung der Anzahl Umdrehungen pro Minute und eine Erhöhung des Trittwidestands verursacht. Wenn ein Patient langsamer tritt, kann es sein, dass bei diesen Ergometern der Widerstand derartig hoch wird, dass die Gefahr einer Überbelastung besteht. Weiterhin ist es für den rehabilitierenden Patienten sehr frustrierend, denn bei Ermüdung wird die Übung gerade schwerer. Mit dem EN-Cardio Crosswalker und Konstantes Drehmoment modus wird dies verhindert und Ihre Patienten können auf sichere und angenehme Weise rehabilitieren.





Crosswalker

EN-Train-kompatibel

Der Crosswalker kann vom EN-Train-Konzeptaus angesteuert werden, wodurch das gesamte Training vorab einfach zusammengestellt werden kann, die Einstellungen des Ergometer anhand einer Chip-Karte automatisch ausgeführt und die Resultate übersichtlich in der Software wiedergegeben werden können.

Einfach und gut geeignet für jedermann

Auch ohne das EN-Train-Konzept mit den automatischen Einstellungen ist der Crosswalker besonders einfach zu bedienen. Eine ausgeklügelte, gründlich getestete Interface sorgt dafür, dass Jeder – Jung und Alt – einfach mit diesem Übungsgerät umgehen kann.

- Einheitlicher Betrieb
- Vollfarb-Touchscreen
- Ergonomische Auslegung
- Abnutzungsstabile Wirbelstrombremse
- Pulsanzeige, Standard mit eingebauten kabellosen Sigma Sport Empfänger
- Geräuscharmer Riemenantrieb
- Smartcard-Technologie
- Spielmodus
- HR-Trainingszonen

Crosswalker

BESTELLDATEN

1413931 Crosswalker

Zubehör:

3496837 Sigma Sport Transmitter

3496838 Elastisches Band für den Sigma Sport



3496837



3496838



Crosswalker

VERWANDTE PRODUKTE

EN-Train

Dank der individuellen Verwendungsmöglichkeit dieses Konzept können Sie alle Ihre Patienten automatisch persönlich begleiten. Wie selbstverständlich lassen sich das Endziel und die dazwischenliegenden Einzelschritte definieren in EN-Train..

Bestelldaten

1411811 EN-Train Installationskit



Crosswalker


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Netzspannung: | 100 – 240 V |
| Frequenz: | 50 – 60 Hz |
| Maximale Spannungsvariation: | ±40 VA |
| Bremsprinzip: | prozessorgesteuerte Wirbelstrombremse |
| Herzfrequenz: | Sigma Sport Brustband und Empfänger |
| Übungsarten: | konstantes Drehmoment konstante Leistung konstante Herzfrequenz |
| Parameteranzeige beim Training: | Zeit, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Abstand, Arbeit, Leistung, Widerstand und RPM |
| Abmessungen (LxBxH): | 190 x 55 x 177 cm |
| Gewicht: | 80 kg |
| Max. Patientengewicht: | 150 kg |

Dies ist ein medizinisches Gerät



Es entspricht allen geltenden medizinischen Vorschriften. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung (herunterladbar über www.enraf-nonus.com).

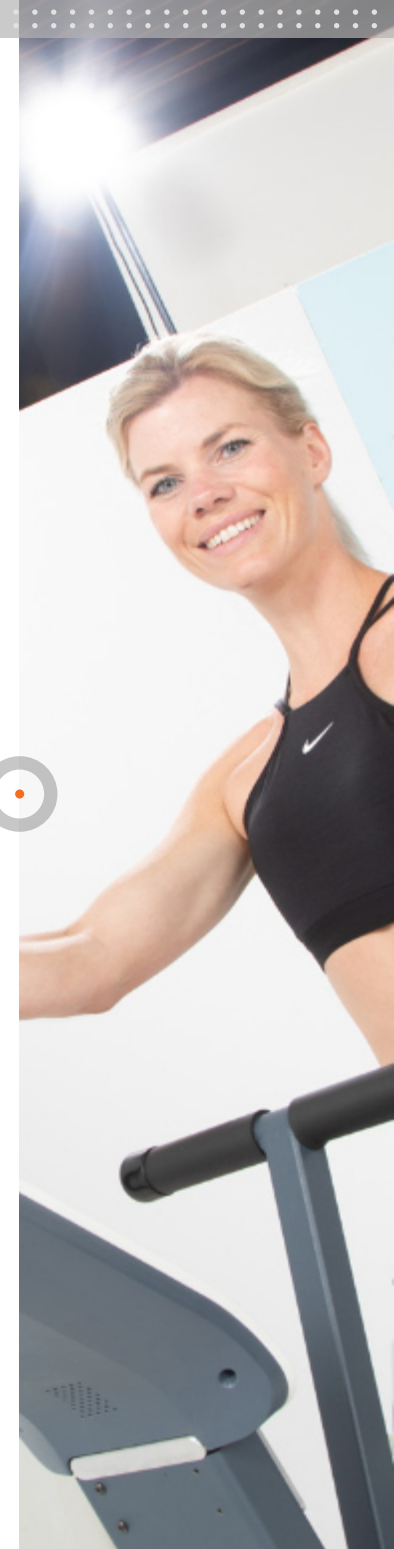



Crosswalker

Ein übergreifendes
Workout-Ergometer

STOLL Medizintechnik GmbH | Eisentalstr. 31 | D-71332 Waiblingen

www.stoll-mt.de | info@stoll-mt.de | +49-(0) 7151 51652



PARTNER FOR LIFE